

AOKIA

Designed by JOVS

取扱説明書

「取扱説明書」の通りに製品を取り扱ってください。ご質問は、カスタマーセンターにお問い合わせください。

- ⊘ 危険：ケガの原因となりかねない誤った操作を指しています
- ❗ 警告：危険が生じかねない誤った操作を指しています
- ⚠ 注意：人体へのリスクや物品の破損の原因となりかねない誤った操作を指しています

⊘ 危険



- ⊘ 水の入ったバスタブ、浴槽用たらい、洗顔用たらい、またはその他容器の近くで製品を使用しないでください。
- ⊘ お子さまに本製品で遊ばせないでください。
- ⊘ 身体に障がいのある方、精神に障がいのある方など経験や知識が不足している(お子さまを含む)方は、保護者監視のもとでご使用ください。
- ⊘ 本製品とACアダプターは乾いた状態を保ってください。
- ⊘ 製品が壊れた場合は、すぐにご使用をやめてください。感電の危険があるため、内部の部品に触れないでください。
- ⊘ 目に直接使用しないでください。
- ⊘ 製品の故障や発火を避けるため、通気孔がふさがった状態で使用しないでください。
- ⊘ 本製品に関する15歳以下のお子さまの使用データが不足しているため、15歳以下のお子さまに本製品に触れさせないようにご注意ください。またお客様ご自身がお使いになる場合も、15歳以下のお子さまの近くでは使用しないでください。

❗ 警告

- ❶ 製品の故障や不具合を避けるため、発光部を消磁しやすい物品に近づけないでください。
- ❷ ケガの原因となるため、衣服、髪の毛その他の物品に照射しないでください。
- ❸ ケガの原因になりますので、ペットには使用しないでください。
- ❹ 目を傷める原因になりますので、目の周りでは本製品を使用しないでください。
- ❺ 周囲温度差が20℃以上になる場所でご使用になる場合（低温環境から高温環境、またはその逆）、製品の電源を切り2時間ほど待った後、使用してください。
- ❻ 火災や感電によるケガの原因となりますので、燃えやすいものや爆発の危険のあるもの（スプレー、ガソリンタンク）のそばでは使用しないでください。
- ❼ 本脱毛器の使用環境温度は0℃～40℃です。ご使用になる前に室温をご確認ください。
- ❽ 熱くなった発光部は、やけどの原因となりますので、使用直後には発光部を触らないでください。
- ❾ 製品の重大な故障の原因となりますので、製品を直射日光や紫外線ライトに長時間さらされる場所に置かないでください。
- ❿ 製品の故障を避けるため、電源を入れても内蔵ファンが回転していない場合（ブーンと音が聞こえない）は、使用を中止してください。

▲ ご注意

- ▲ 脱毛箇所の皮膚がぬれていたり、汚れていたりすると、使用の妨げになります。また照射されない、または異常な照射の原因となります。
- ▲ からだの部位に合わせて、必要に応じた照射強度でご使用ください。照射強度はレベル1から段階的に上げてください（ご使用状況や肌質に合わせてください）。
- ▲ ワキに照射した直後は、制汗剤のご使用を避けてください。
- ▲ 製品の性能を保つため、定期的に発光部のP12にあります掃除とお手入れを行ってください。
- ▲ 製品の故障や、皮膚のトラブルの原因となりますので、使用後には次回の使用のために、脱毛器に付着した体毛やスキンケア用品を拭き取ってください。
- ▲ 使用後には皮膚が赤くなり、熱く感じますが、これは正常な現象です。冷感脱毛機能を使うことで、皮膚の不快感を和らげることができます。
- ▲ 製品の電源を入れた状態で製品から離れないでください。使用後は速やかに電源をお切りください。
- ▲ 皮膚の表面に体毛が残らないようにし、完全に乾燥した状態でかつ油性物質による汚れがない清潔な状態で使用してください。
- ▲ お手入れ後48時間は、脱毛箇所に紫外線が直接当たらないようにしてください。
- ▲ 白髪または灰色など色の薄い体毛の除去はおすすめしません。
- ▲ 本製品をぶついたり激しく振らないでください。
- ▲ 製品の電源を入れた状態でプラグを直接抜かないでください。機械が故障する恐れがあります。
- ▲ プラグを抜くときは、電源を切り、製品の放熱処理後に抜いてください。

ご使用に適さない方々や状況

- ・ 妊婦、授乳期の女性、月経期間中の女性、傷跡、糖尿病患者、肌質の弱い方、光刺激に敏感な方は使用しないでください。
- ・ 重い心臓病、中～重度の高血圧、悪性腫瘍、毛包炎、伝染性皮膚疾患、皮膚のやけど、血液凝固障害をお持ちの方は使用しないでください。
- ・ 過去の傷跡や縫合不全があった方を含め、膠原病、代謝異常疾患をお持ちの方は使用しないでください。
- ・ 照射部位に静脈瘤や毛細血管拡張症などの血管疾患をお持ちの方は使用しないでください。
- ・ 光刺激に敏感で皮膚の発疹やアレルギーを起こしやすい方は使用しないでください。
- ・ 照射部位にヘルペス、皮膚疾患、血腫が見られる場合は使用しないでください。
- ・ 免疫反応を抑制しなければならない病気（HIV感染、エリテマトーデス、ポルフィリン症など）の方は使用しないでください。
- ・ 出血性の病気の方はいずれも使用することができません。イソトレチノイン、AHA、サリチル酸（BHA）またはアゼライン酸を外用している方はご使用できません。
- ・ 30日以内に薬品による脱毛を行った方、1週間以内に美白製品やビタミンAを含む化粧品を使用された方は十分に注意して使用してください。
- ・ エッセンシャルオイルなどと一緒に使用することはできません。照射部位の皮膚を清潔で乾燥した状態にしてください。クリームやオイル、他の化粧品はしっかりと落としてください。
- ・ アスピリンや免疫抑制薬、イソトレチノインを服用している間は使用しないでください。細菌テトラサイクリン、サルファ薬などの光線過敏症薬を使用された方は使用しないでください。
- ・ 紫外線による皮膚障害（日焼け）がある場合は、皮膚の修復後使用してください。粘膜など敏感な部位には使用しないでください。
- ・ 傷口がある場合はどのようなものでも治るまで使用しないでください。（使用を検討される場合は、医師にご相談のうえで使用してください）

次の部位には使用しないでください。


- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1/ 口腔内、陰部、粘膜など | 7/ 眉、頭髮 |
| 2/ 整形、手術を受けた箇所 | 8/ 耳 |
| 3/ のどぼとけ | 9/ 乳首、乳輪 |
| 4/ 眼球、まぶた、目の周辺 | 10/ ヘその中 |
| 5/ にきびのある箇所 | 11/ 大静脈 |
| 6/ しみ、あざのある箇所 | 12/ タトゥー、ボディペイントが施された箇所 |

(注意 :上の例は一例です。使用できるか不明な場合は、かかりつけの医師にお問い合わせください。)

❖ 製品規格


定格・仕様	
製品名	AOKIA 家庭用脱毛器
型番	JR8
照射面積	3.3cm ²
波長	590-1200nm
ACアダプター	入力:100-240V~50/60Hz,1.5A 出力:24V ≒ 2.5A

各部の名前

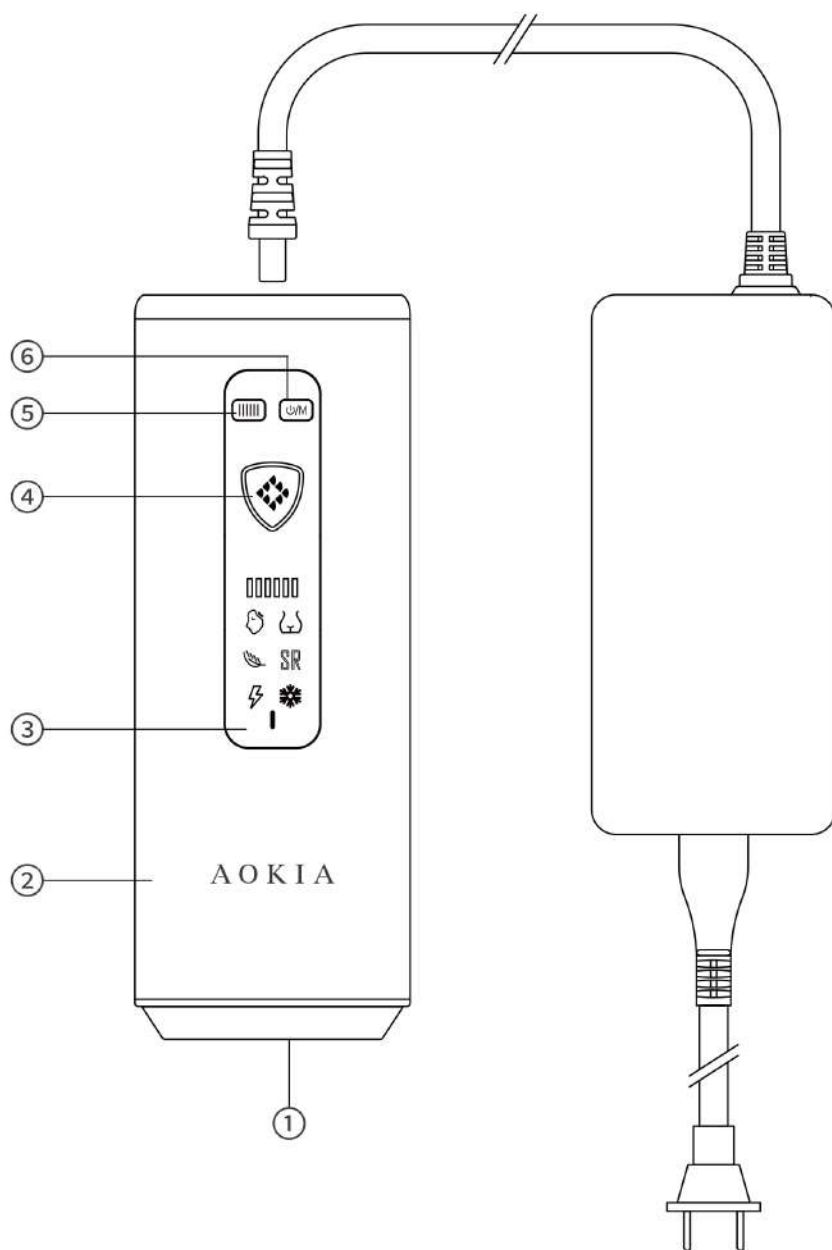

【各部の名前】

① サファイア (発光部)	④ 照射ボタン
② 本体 レベル	⑤ レベル選択ボタン
③ 表示パネル	⑥ 電源/モード選択ボタン

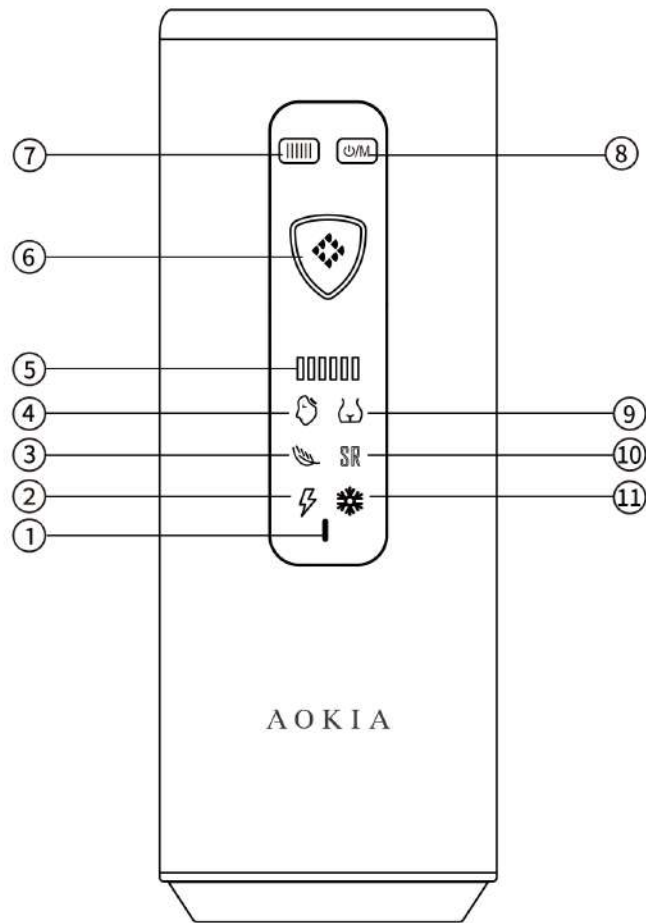

【パネルの説明】

① センサーライト	② 連続照射モード
③ ボディーモード	④ 顔モード
⑤ 照射レベル表示	⑥ 照射ボタン
⑦ 照射レベル選択ボタン	⑧ 電源/モード選択ボタン
⑨ ビキニモード	⑩ SRモード
⑪ 冷感モード	

❖ 6つのモード

使用時に部位に合わせたモードを選択することで、より良い効果を得られ、より快適に脱毛を行うことができます。



顔モード：髭と顔の脱毛を行うときに選択します。


ビキニモード："VIO"ゾーンの脱毛を行うときに選択します。

ボディモード：手、肩、足などの体の部位の脱毛を行うときに選択します。

SRモード：産毛を脱毛する時に選択します。

連続照射モード：自動で連続照射します。

冷感モード：電源を入れると自動で冷感モードが点きます。

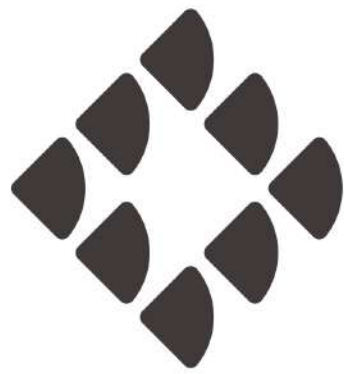

03.04.02.0042







❖ ご使用前の準備

1. しっかりと皮膚を清潔にし、体毛が残らないようにしてください。完全に乾燥した状態で、油性物質による汚れを落としてください。
(美容乳液などの残留物)
2. 発光部にホコリや体毛などの汚れや、破損や不具合がないことを確認してください。製品の故障や劣化、皮膚のトラブルの原因となりますので、汚れはしっかりと落としてください。
3. 脱毛器の使用前に皮膚試験を行い、2時間後、皮膚の状態を確認します。照射部位に異常がなければ問題なく使用することができます。

以下の表を参考にしてご自身の肌や体毛の色にあった光の強度を特定してください

ヒント：肌色にある見本を皮膚に当てて、ご自身の皮膚の色と比較することもできます。痛みや不快感があれば、強度を下げます。肌の色が濃い方は照射レベルを低めに設定することをお勧めします。

強度使用参考表(肌色カースケール)

肌色 毛の色						
暗い金色/ 薄い茶色	1-6	1-6	1-5	1-4	×	×
茶色	1-6	1-6	1-5	1-5	×	×
濃い茶色	1-6	1-6	1-5	1-5	×	×
黒色	1-6	1-6	1-6	1-5	×	×

(ご注意：表中の「x」で示された肌色は本製品の使用に適しません)

ご注意：白色、灰色、赤色、金色の体毛は本製品の使用に適しません

ご注意：いろいろな理由により、肌は照射時間や状況により異なる反応が出る場合があります

❖ 皮膚照射試験

本製品を初めて使用する場合やタンニングを行った直後は、手の位置でテストをするなど、お体の各部位ごとに適切な照射強度を設定するため、脱毛部位ごとに皮膚試験を行ってください。

1. 皮膚試験をする部位を除毛してください。
2. ソフトモードを選び、LV1を選択します。脱毛器の発光部を肌に密着させ、1回照射してください。
3. LV2を選択し、脱毛器を肌に密着させたまま次の部位にスライドさせ照射試験を行います。
4. この操作を繰り返します。段階的に出力レベルを上げ照射を行い、肌の状態から適切な出力レベルを確認します。
(ご注意： 皮膚テストの2時間後、肌に異常がないことを確認してから、該当する出力レベルでご使用ください。肌が赤くはれた場合は、出力レベルを下げてご使用ください。)

❖ 脱毛後のケア


- ・ 脱毛後6時間は水にぬれないようにすることをお勧めします。その後保湿液で照射部位を保湿します。
- ・ 脱毛後の皮膚にはフレグランスパックやスクラブ入りの化粧品は使用しないでください。
- ・ 脱毛後48時間は、紫外線を避けるようにし、必要に応じて日焼け止めなどを塗ってください。
- ・ タンニング中に脱毛しないでください。
- ・ 脱毛後に脱毛箇所の整形手術(脱毛箇所のみ)を行う場合は、医師に相談してください。
- ・ 違和感を感じる場合は、ご使用を直ちに停止し、医師に相談してください。

❖ 使いかた




01

カミソリでお手入れをする箇所の体毛を除去し、皮膚の表面を清潔にします。

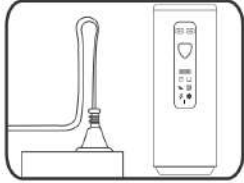


02

本体とACアダプターをつなぎ、AC100Vの壁コンセントのコンセントに単独でプラグを差込みます。電源/モード選択ボタンを2秒間長押しすると電源が入りセンサーライトが点滅します。

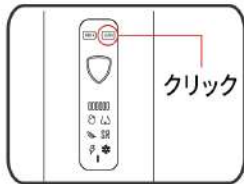

03

電源/モード選択ボタンを押し、お使いになるモードを選択します。

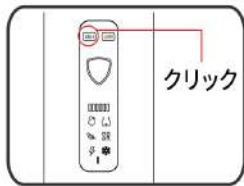

04

レベル選択ボタンを押し、照射レベルを設定します。初めてお使いになる時はレベル1から始めることをおすすめします。



05

必ず付属の保護メガネを着用してください。



06

サファイアを肌に垂直に、密着するように押し当てます。照射ボタンを押すと、脱毛が始まります。(照射ボタンを2秒間長押しすると連続照射モードになります)

(すべてのモードで、3分間機器を使用しないと、自動的に電源が切れます。また、スタートから30分で、強制的に電源が切れます。) 電源が切れた後もファンは20秒回り続けて製品の放熱処理が行われます。

❖ 使用の間隔

時 間	1~4周目	5~8周目	8周目以降
使用の頻度	3~4回/週	2~3回/週	半月または1か月に1度

※体毛の成長速度に合わせて複数回使用してください。体毛が多い方はさらに強度や頻度を上げることができます。実際の状況に合わせて調節してください。

❖ 掃除とお手入れ

製品を正しく、また長くお使いいただくために、毎回の脱毛前後に本製品の掃除を行ってください。正しく掃除を行わず、長期間体毛やホコリが機器にたまったままの状態であると、故障の原因や本製品は本来の効果を発揮することができません。



1.掃除をする前に、必ず機器の電源をオフにしてください。電源プラグを抜き、本体が冷めるまでお待ちください。

2.本製品の反射板、および機器の部品を中心に確認してください。汚れを落とし、清潔な状態にします。



3.水道水の流水や食洗機で本製品や付属品を洗浄しないでください。

4.スチールたわしや研磨剤の入った洗剤（歯磨き粉など）、腐食性のある液体（ガソリン、エンジンオイル、アセトン）などで本製品に使用しないでください。

注意：掃除しても反射板の汚れがとれない場合は、本製品の使用を中止してください。



環境保護の観点から、製品を廃棄する場合は、一般のごみと一緒に捨てることはせず、指定された回収施設に処分を依頼してください。

❖ よくあるご質問と答え

この章では本製品の使用上の質問を扱っていますが、これらの情報で解決できない場合は、カスタマーサポートセンターにお問い合わせください。

ご質問	考えられる原因	解決方法
電源が入らない	電源の接続不良	電源がしっかりと接続されているか確認してください
光が出ない	本体ヘッドおよびボディが過熱状態にある、本体ヘッドが皮膚に密着していない	機器が自然に冷却するのを待ってから使用してください。本体を皮膚に密着させて照射ランプが点滅するのを待ちます
動作ランプが点灯しない	機器の故障	電源が正常に入るか確認してください。すぐに製品を修理または交換してください
脱毛時に、我慢できないほど痛みを感じる	脱毛部位の体毛がそられていない	本製品の使用前に、照射部位の体毛をそり落としてください。カミソリ負けが起きている場合は、皮膚が回復するのを待ってから、痛みを感じない強度で使用してください
	脱毛に適さない箇所で使用している	目のまわり、内陰唇、膣、肛門、乳頭および乳輪には使用しないでください。男性は陰囊には使用しないでください
	光の強度が強すぎる	痛みを感じない照射レベルまで下げてください
	反射板の破損	すぐに製品を修理または交換してください

ご質問	考えられる原因	解決方法
脱毛の効果に不満を感じる	ご自分に合った照射レベルよりも低い設定で使用している場合があります	次回は照射レベルの設定を上げてください
	お手入れ箇所の照射間隔があきすぎると、作用するエリアが少なくなるため期待した効果が得られません	続けて照射する場合、隣の部位と少し重なり合う位置に照射してください
	本製品は一部の体毛の色には効果を発揮しません	体毛の色が明るい金色、灰色、赤色や白色の場合、照射効果はあまり期待できません
	ご使用の頻度が低いことが考えられます	取扱説明書の推奨される使用方法に従って、しばらくお手入れを続けてください適切な頻度で使用回数を増加してください
	光照射に対する反応が遅いことが考えられます	最適なお手入れの頻度は人によって異なります。ご自分の肌の状況に合わせて適切にお手入れの頻度を上げることをおすすめします
照射時に異臭がある	サファイアの汚れや皮膚に体毛が残っている	サファイアを拭いてください。体毛をそり落とし強度を下げてください

ご質問	考えられる原因	解決方法
脱毛後、脱毛箇所が赤くなる	わずかな赤みは正常な反応で身体に害はありません。症状はすぐに治まります	脱毛後のケアを行ってください
使用中に製品に熱がこもる	正常な現象です	/
本体が過熱し、自動的に電源を切れる	機器の過熱保護機能	製品を風通しの良い場所に置いて冷ましてください
<p>異常または故障の場合、すみやかにアフターサービス窓口までご連絡ください。購入時の領収書や保証書は、製品のメンテナンスに必要ですので、大切に保管してください。</p>		

◆ 特別説明

AOKIAは取扱説明書の変更や解釈に関する一切の責任を負い、本書の内容には万全を期しています。本書の内容について十分な確認をしていますが、万一印刷漏れなどがあった場合、法律で認められる範囲内において、当社は最終的な解釈の権利を留保します。また、同時に当社は製品や取扱説明書の改良・変更の権利を留保します。製品の構造は予告なしに変更される場合があります。本書に記載された一部の画像やイメージは参考用です。画像と実際の製品とは一部異なることがあります。

家庭用脱毛器保証書

持込修理

本書は、お買い上げの日から下記期間中、故障が発生した場合に、下記記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常なご使用状態で、保証期間中に故障した場合には無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に製品と本書をご持参・ご提示いただき、お申し付けください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、ご相談窓口にご連絡ください。
 - ご転居の場合の修理ご依頼先などは、お買い上げの販売店、またはご相談窓口にご相談ください。
 - ご贈答等で本書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、ご相談窓口へご連絡ください。
 - 保証期間中でも次の場合には原則として、有料とさせていただきます。
(イ) ご使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障および損傷。
(ロ) お買い上げ後の落下、移動、輸送などによる故障および損傷。
(ハ) お買い上げ後の地震、水害、落雷、その他天災地変、および公害、煙害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定以外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障および損傷。
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
(ホ) 一般家庭以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障および損傷。
(ヘ) 本書のご提示のない場合。
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in japan.
6. 本書は、盗難、火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保管してください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料期間修理をお約束するものです。

従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、またはご相談窓口にお問い合わせください。

※譲渡・転売・中古販売・オークション・個人売買・リサイクル店などによる販売品については、弊社の責任の範囲ではありません。

※保証期間経過後の修理や補修性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

※修理ご依頼品のご持参及びお持ち帰りの交通費、またご送付される場合の送料及びその他の費用はお客様のご負担となります。

※保証の範囲は、修理・交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他製品使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。

※出張修理を依頼され、本体に原因がないと判断した場合は、保証期間中であっても出張料などを申し受けますので、あらかじめご承知おきください。(出張修理対象製品のみ)

ご販売店様へ：必要事項をご記入のうえ、お客様にお渡しください。

品 番	JR8		
	対 象 部 分	期間(お買上げ日より)	保 証 の 条 件
保 証 期 間	本 体	1 年	持 込 修 理
お買上げ日	年 月 日		
お 客 様	お名前 ご住所 電 話		様
販 売 店	販売店名 ご住所 電 話		印

※個人情報の取扱いについて

弊社は、お客様の個人情報の保護に関する法律を遵守し、お客さまの個人情報の保護に努めます。

お客様の個人情報は、弊社製品の保証・アフターサービスのために利用し、他の目的には利用いたしません。

お客様の同意なしに第三者への開示・提供を行うことはありません。

弊社は、お客様の個人情報が適切に管理されるよう、業務委託先に対して指示・監督を行うなど十分な注意を払います。

エスケイジャパン株式会社

【ご相談窓口】 〒818-0063 福岡県筑紫野市桜台 2-23-2

TEL.092-921-4210 Eメール:skjsupport@qtk.co.jp

電話受付時間 午前10時～午後1時、午後2時～午後5時(土・日・祝日を除く)